


操作ハンドルの取付説明書

■内容物

ハンドル	1	M5ナット	4
T字ハンドル	1	ワッシャー	4
ハンドルベース下	2	バネ座金	4
ノブ付きボルト	2	スパナ	2
M5ボルト	4		


■取付位置

リフター天板の短辺側の中心にハンドルを上からはめ込みます。
駆動輪と反対側の天板部短辺部に取り付けます。
※あらかじめリフターを少し上昇させておくと作業しやすくなります。

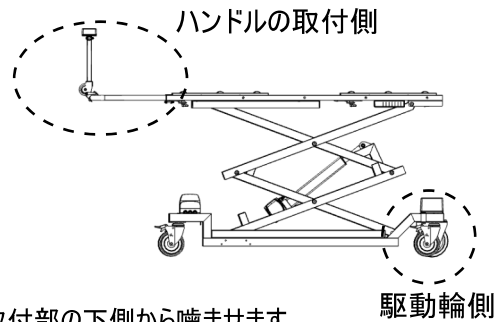

■取付手順

1. ハンドルを天板の短辺中心に合わせて差し込みます。
2. 付属のハンドルベース下(コの字のパーツ)を、図のような向きで取付部の下側から噛ませます。
3. M5ボルトを正面から通し、ワッシャー、バネ座金、ナットの順で取付けて締め付けます。
4. 付属のスパナ(2本)を使って、ばね座金が平らになる程度にしめつけて下さい。
5. T字ハンドルは、T字ハンドルのブラケット部の穴位置とハンドルの穴位置に合わせてはめ込みます。
6. ブラケット部は水平45度になる向きに取り付けます。
7. ノブ付きボルトを手で締めていきます。
8. ボルトが回しにくい場合はTハンドルを少し揺らして穴位置を調整するとすと入りやすくなります。
9. ケーブルの本体側(オス)のとT字ハンドル側(メス)のコネクターを接続する。

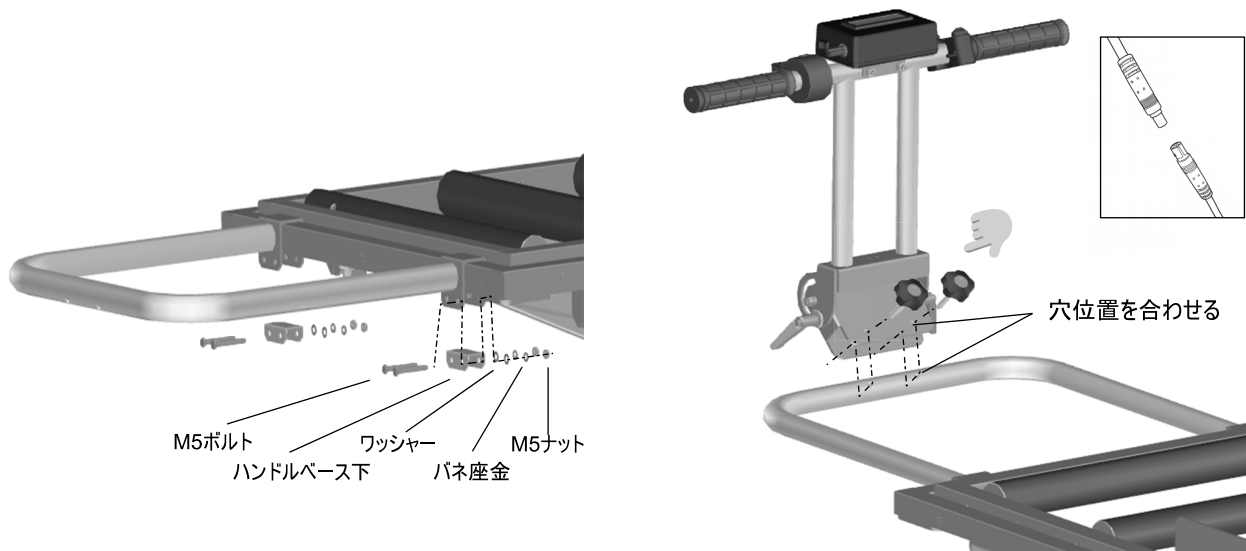

【お問い合わせ】

INPEACE / 株式会社吉澤企画

〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町391

TEL 044-387-7482(平日10-17時) FAX 03-6862-4848

info@inpeace.jp

はじめにお読みください。


この度は、シルフィーリフト ソロM e-Drive、シルフィーリフト デュオM e-Driveをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

ご注意

輸送中の誤作動の防止のために、「緊急停止ボタン」を押した状態で出荷しております。

ご利用前に、「緊急停止ボタン」を解除してからご利用ください。

■緊急停止ボタンの解除方法

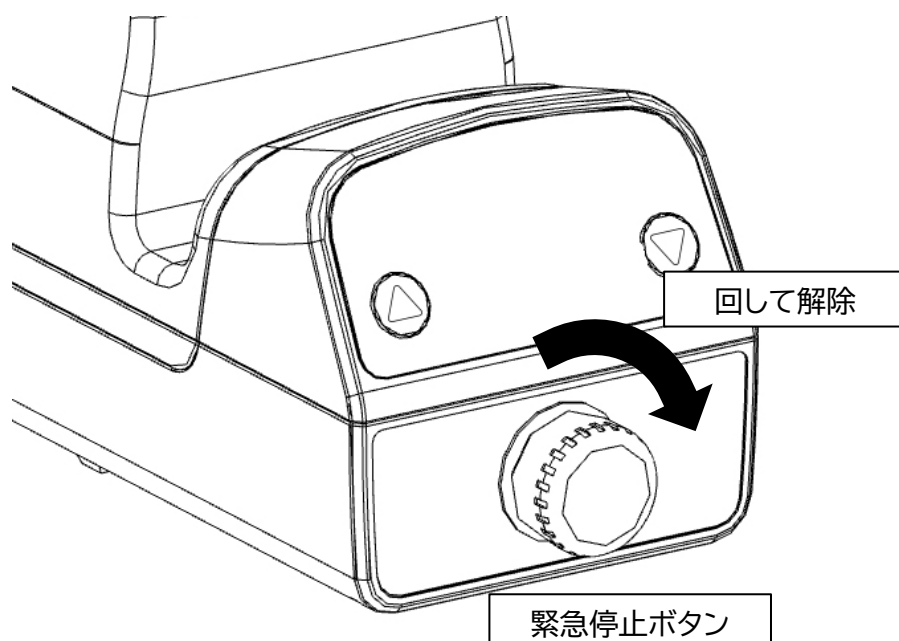

【推奨】

ご使用前に、バッテリーを12時間以上充電してからご利用ください。

INPEACE お客様ご相談窓口

万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせがございましたら、下記の相談窓口まで、お気軽にご連絡下さい。

TEL 044-387-7482

メール info@inpeace.jp



INPEACE インピース

<https://inpeace.jp>

販売元 株式会社吉澤企画

〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町391